

trident



READER

Escáner de placas de fósforo

READER

El escáner de placas de fósforo diseñado para capturar y almacenar imágenes digitales en menos tiempo y con la máxima simplicidad.

Rápido

Reader envía imágenes digitales de alta precisión a cualquier PC en menos de 10 segundos.

Simple

Sin botones ni control remoto, instale Reader directamente a su computadora con la práctica conexión USB. Tres luces LED le indicarán el estado del proceso.

Reader es un sistema compacto y ligero, mide tan solo 17 x 19 x 30 cm.


Inteligente

Reader reconoce automáticamente el tamaño de la placa de fósforo. Inserte la placa en la ranura y Reader comenzará a escanear.

Reader tiene un adaptador de corriente interno que le permite trabajar en un rango de 100 a 220 V.

Sin costos extras

Reader permite obtener imágenes nítidas en alta definición, usando la misma placa, sin costo adicional de procesamiento de película: no se necesitan químicos, procesador de película ni cuarto oscuro.

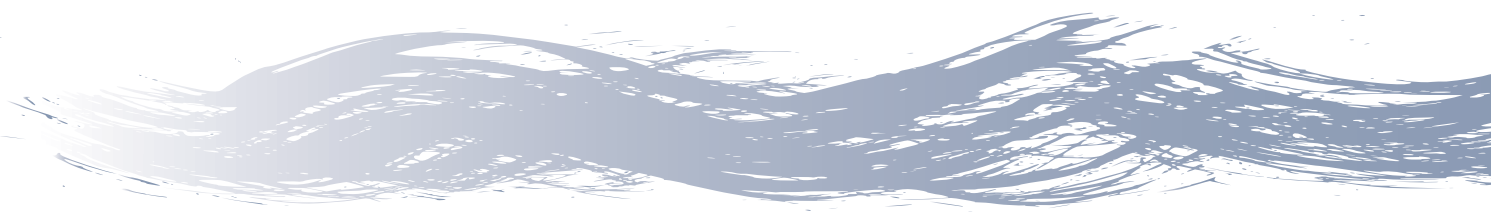

Reader escanea
placas de fósforo de
tamaño 0, 1, 2, y 3

Cuáles son las ventajas
de usar placas de fósforo?

Se pueden reutilizar cientos de veces
No tienen cables
Son ultra-flexibles
Son muy delgadas
Permiten un posicionamiento en boca
cómodo para el paciente



Escanear, borrar y
reutilizar en un solo
paso

El proceso es simple y toma
algunos segundos. Inserte la
placa en la ranura y mientras la
imagen aparece en la pantalla
del PC, la función de borrado
automático limpia la placa para
la siguiente lectura.

Nunca fue tan fácil obtener
imágenes HD de larga
duración. Reader simplifica el
proceso con óptimos
resultados.



Conexión USB Directa

Conecte el escáner directamente al PC
Conexión compatible con un puerto USB
2.0 estándar.



Software Deep-View

Software dinámico y fácil de usar
Opción TWAIN
Fácil instalación
Operación intuitiva



Multi-usuario

Hasta 10 usuarios



DICOM 3



Características del PC

4GB RAM, USB 2.0 interface,
CPU Intel i5-2520 2.5 GHz o superior
Windows XP (SP3)/7 (32/64 bit SP1)/8 (64 bit)
Monitor 1024 x 768, por lo menos 6500 colores



trident
made in Italy

Detrás de cada gran
producto hay una
gran marca

trident

Trident S.r.l.
Via Artigiani 4
Castenedolo, 25014 BS
Italy
Tel 39 030 2732485
trident-dental.com